


## MinuteCut™ Mnl I

### 酶切位点

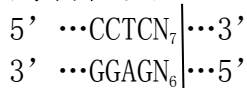

### 产品组成

MinuteCut™ Mnl I	10 次	50 次
Cat. No.	6034010	6034050
MinuteCut™ Mnl I	10 $\mu$ l	50 $\mu$ l
10 $\times$ MinuteCut™ Buffer	50 $\mu$ l	1.5 ml
10 $\times$ MinuteCut™ Red Buffer	50 $\mu$ l	1.5 ml
10 $\times$ Loading Buffer	1.5 ml	1.5 ml
说明书	1 份	1 份

### 产品储存

- 20 $^{\circ}$ C 保存,有效期为两年以上。

### 技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: [technical@simgen.cn](mailto:technical@simgen.cn), 电话：400-0099-857。

### 产品介绍

MinuteCut™ 快速内切酶是经过基因工程重组，能够在 5~15 分钟内快速、精确地完成 DNA 切割的限制性内切酶，适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 的快速酶切。所有 MinuteCut™ 快速内切酶系列产品均可共用一种 10 $\times$ MinuteCut™ Buffer 或 10 $\times$ MinuteCut™ Red Buffer，大大简化酶切反应体系。此外，本公司的去磷酸化、连接试剂在 MinuteCut™ 酶切 Buffer 中具有 100%活性，支持一管化反应，提升“酶切-修饰-连接”的体验。

### 质量控制

#### 功能活性检测

最适反应温度下，在 20  $\mu$ l 反应体系中，1 $\mu$ l MinuteCut™ Mnl I 能够在 5 min 内完全消化 1 $\mu$ g  $\lambda$ DNA。

#### 超长时间温育检测

最适反应温度下，将 1 $\mu$ l MinuteCut™ Mnl I 与 1 $\mu$ g  $\lambda$ DNA 共同温育 3h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解，延时酶切可能出现星号活性。

## 使用方法

### 1. DNA 快速酶切

按下表配置

	质粒 DNA	*PCR 产物	基因组 DNA
DNA	≤1μg	≤ 0.2μg	≤1μg
MinuteCut™ Mnl I	1 μl	1 μl	1 μl
10×MinuteCut™ Buffer 或 10×MinuteCut™ Red Buffer	2 μl	3 μl	3 μl
ddH <sub>2</sub> O	5~15 μl	5~20 μl	5~20 μl
Total	20 μl	30 μl	30 μl

\* 本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，且残留的 Taq 酶具有外切酶活性，会直接影响 DNA 酶切的精确度，因此如果酶切产物后续需进行克隆等操作，推荐用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对 PCR 产物进行纯化后再进行酶切。

- (1) 轻轻吹打或轻弹管壁混匀，低速离心数秒使液体聚集到离心管管底。
- (2) 37℃ 温育 5 min。
- (3) 将酶切产物直接电泳（使用 10×MinuteCut™ Red Buffer）或与 10×Loading Buffer 混合后（使用 10×MinuteCut™ Buffer）电泳。

### 2. 双酶切或多酶切

- (1) 每种快速内切酶的用量为 1μl，并根据需要适当扩大反应体系；
- (2) 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10，比如常用的双酶切体系至少需要在 20 μl 的反应体系中酶切；
- (3) 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

## 注意事项

- 1) 不建议进行 10 hr 以上酶切，易导致星活性。
- 2) 10×MinuteCut™ Red Buffer 可能会干扰酶切产物的荧光分析。因此，酶切产物荧光分析检测时推荐使用无色的 10×MinuteCut™ Buffer。
- 3) DNA 酶切 5 min 仍不能被切开，说明 DNA 含有抑制内切酶活性的抑制物，可选用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对 DNA 进行纯化后再进行酶切。
- 4) 如果从野生型的大肠杆菌或者是非限制性内切酶缺陷型（endA+）的宿主菌（比如 BL21、HB101 等）中提取的质粒 DNA 用作酶切，可能会出现酶切产物拖尾的现象，可选用 Simgen DNA 纯化试剂盒（Cat. No. 2101050）对质粒 DNA 进行纯化后再进行酶切。
- 5) 甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	无影响	无影响	序列可能重叠 剪切阻断